

ビジオフォーカス Animal

元動薬第1729号


ビジオフォーカス Animalは、動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。

目、肛門、耳、歯茎から測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。

全ての生物は赤外線を放出しています。ビジオフォーカス Animalはその赤外線熱を感知し、直腸体温測定値に相当する体温に換算します。



動物の **目** を通じてわずか3秒で体温測定！

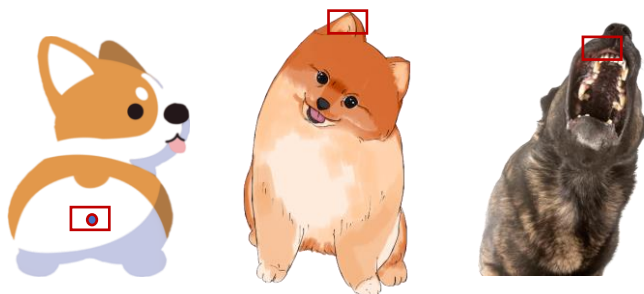

肛門、耳、歯茎から測定することも可能
非接触で清潔な測定



正確な測定距離をLED投影ライトで可視化
他製品にはない独自の特許技術保有
※目に投射しても安全なLEDライトです。

電源 単4形アルカリ乾電池×4本

測定精度

32.0~35.9°C : ±0.3°C
36.0~39.0°C : ±0.2°C
39.1~42.5°C : ±0.3°C
42.6~43.5°C : ±1.0°C

お問い合わせ

発売元：株式会社 ビットストロング 画像営業部
<https://www.bitstrong.co.jp>
 〒105-0013 東京都港区浜松町1-1-10 秋間ビル6F
 TEL:03-3437-5315 FAX:03-3437-5368
 お問い合わせ
imaging@bitstrong.co.jp



ビジオフォーカス VET

元動薬第1728号


ビジオフォーカス VETは、動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。

目、肛門、耳、歯茎から測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。

全ての生物は赤外線を放出しています。ビジオフォーカス VETはその赤外線熱を感知し、直腸体温測定値に相当する体温に換算します。



動物の **目** を通じてわずか3秒で体温測定！

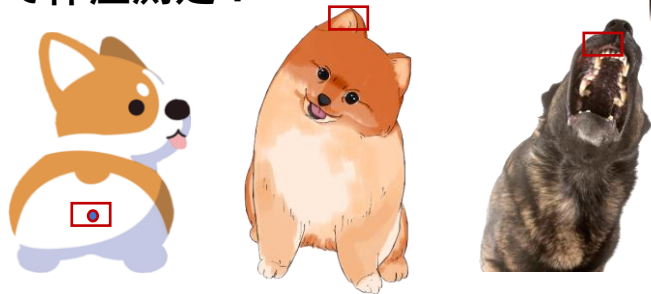

肛門、耳、歯茎から測定することも可能

測定値を体温に換算する補正値は動物の種類やサイズ、測定部位によって変化します。

ビジオフォーカスVETはスマホの専用アプリを用いて3つのボタンにそれぞれ異なる補正値を適用することができます。

正確な測定距離を
LED投影ライトで可視化
他製品にはない独自の特許技術保有



近い

遠い

適正距離

